



پورت چیست؟

منبع: برونر و سودارث داخلی و جراحی ویراست ۲۰۱۵

تهیه و تنظیم: فرزانه فصیح نژاد

زیر نظر آقای دکتر اسلامپور

متخصص اونکولوژی

بهار ۱۴۰۳



مشکلات احتمالی:

عفونت ممکن است در داخل لوله یا اطراف پورت ایجاد شود شما در موارد زیر باید فوراً با پزشک خود تماس بگیرید.

- دیدن ناحیه قرمز متورم یا دردناک اطراف پورت
- علائمی مانند تب، تنگی نفس، لرز و سرگیجه

در این موارد به شما آنتی بیوتیک داده خواهد شد.

در صورت لخته شدن خون در داخل پورت و یا عفونت شدید ممکن است نیاز به خروج پورت می باشد علائم لخته شدن خون در داخل پورت، تورم گردن و قرمزی پورت می باشد.

آیا وجود پورت در تصویر برداری اختلال ایجاد میکند؟


خیر شما با وجود پورت می توانید CT اسکن، MRI را براحتی انجام دهید.

قبل از تزریق:

سرنگ را اول به سوزن وصل کرده و اسپیره کنید. پس از برگشت خون ۱۰ سی سی نرمال سالین تزریق کنید بعد داروی حل شده یا سرم را تزریق نمایید.

بعد از تزریق:

در ناحیه پورت ۱۰ تا ۲۰ میلی لیتر سرم نمکی هپارینه ضد انعقاد خون به داخل پورت تزریق میگردد تا از لخته شدن خون داخل پورت جلوگیری شود. اگر بطور منظم از پورت استفاده نشود لازم است ماهیانه داخل پورت توسط پرستار مجرب و سوزن مخصوص پورت شستشو داده شود.

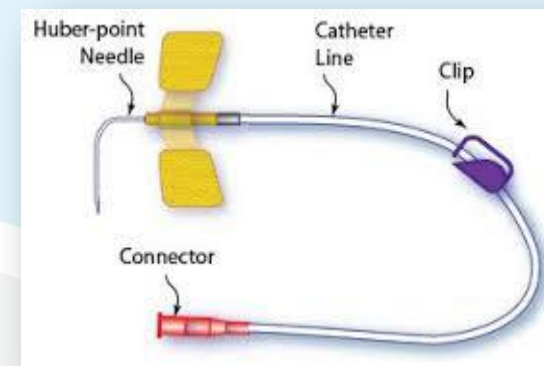

پورت چیست ؟

وسیله ای است که در زیر پوست کارگذاری می شود و نیاز به تزریق از رگ های محیطی برطرف می سازد. پورت معمولا در روی جدار قفسه سینه در سمت راست یا چپ کار گذاشته می شود. هر پورت حدودا قابلیت ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ بار تزریق را دارد.

نحوه جایگذاری پورت:

توسط جراح عروق ویا توسط متخصصین فلوشیپ درد با بی حسی موضعی در مدت کمتر از ۳۰ دقیقه انجام می شود.

کاربرد پورت :

از طریق پورت میتوان داروی شیمی درمانی ، تزریق خون ، آنتی بیوتیک و سرم را بدون نیاز به سوراخ کردن رگ انجام داد. همچنین میتوان در صورت نیاز برای گرفتن نمونه خون آزمایشات نیز از آن استفاده کرد.

مدت زمان استفاده از پورت چقدر می باشد؟

در صورت استفاده صحیح پورت را میتوان برای هفته ها ، ماهها، و در صورت نیاز تا سالها استفاده کرد.

چگونه از پورت استفاده می شود؟


استفاده از پورت باید توسط پرستار و یا فرد آموزش دیده و آشنا با پورت و در شرایط کاملا استریل صورت گیرد و لازم است ابتدا دست ها شسته شوند و محل با بتادین ضد عفونی شده و با استفاده از سوزن مخصوص پورت تزریق گردد.

در صورت نیاز بلافاصله بعد از پورت گذاری می توان از آن استفاده نمود هنگامیکه جهت تزریق دارئی شیمی درمانی یا گرفتن نمونه خون از پورت استفاده شود پوست روی محل پورت استریل گردد و سپس سوزن مخصوص از طریق پوست وارد محفظه میگردد این عمل دردناک نمی باشد.

چه مراقبت هایی بعد از پورت گذاری لازم است ؟

تا ۳ روز بعد از عمل پورت گذاری پانسمان محل پورت تعویض میگردد. بخیه هایی که بر روی پوست زده می شود. معمولا یک هفته تا ۱۰ روز بعد قابل کشیدن می باشد البته بعد از معاینه و اجازه پزشک تعبیه کننده پورت.

در هفته اول ممکن است درد خفیف و کبودی را در محل نصب پورت تجربه کنید. جهت رفع این درد مصرف مسکن ساده مانند استامینوفن به شما کمک خواهد کرد. در صورت باقی ماندن قرمزی و تورم اطراف محل پوست حتما بعد از یک هفته به کلینیک مراجعه کنید.

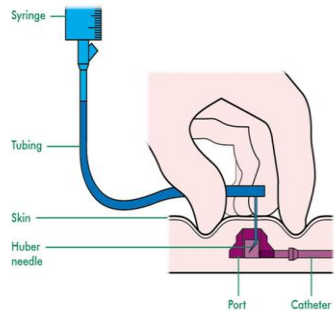

3

2

1